



船井生医

超スマートマイクロチップ技術

船井 **funcare**[®]


動力式筋肉刺激器

Electric Muscle Stimulator



[簡易操作説明]

1 電池安裝(9V電池)

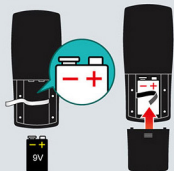

準備好9V電池 1 顆，請將塑膠外膜拆開，並依電池蓋內正負極指示安裝。

2 傳導片安裝



將傳導線接頭插入主機上方凹孔，傳導線另一端分別扣於傳導貼片上。(單片使用無法傳導)

3 貼附貼片



將傳導貼片貼附於欲鍛鍊部位。
※如欲更換貼附位置，請先關機後再行調整。

4 開機



按開機鍵 **ON ▲**，液晶螢幕顯示資訊即為開機狀態。

5 功能模式選擇



按 **MODE** 鍵可選擇模式。
(P1-P12共12組全自動訓練程式)

6 選擇力道



選擇好程式後，按 **ON▲** 鍵可增加力道，按 **OFF▼** 鍵可減低力道；力道分為1~15級，可自由調整。

7 關機



30分鐘後會自動關機，如欲中途停止請按 **OFF▼** 鍵多下至液晶螢幕顯示消失，即為關機。

8 收納貼片



使用完畢請將傳導貼片貼回「傳導貼片保護片」上，可避免粘著貼片互相沾黏污損，延長貼片使用壽命。